



Bond Apatite[®]

INJERTO 3D ADHESIVO
ALL IN ONE



Bond Apatite®

A los 8 meses el 90% del injerto es reemplazado por hueso del propio paciente.

Bond Apatite® es un injerto sintético osteoconductor utilizado como material de relleno óseo destinado a rellenar, aumentar y reconstruir diferentes tipos de atrofas maxilares. Un producto patentado, innovador, basado en la ciencia que supone una revolución en el área de la regeneración ósea.

Bond Apatite® consta de 2 matrices con diferentes características y velocidades de reabsorción.

La primera matriz consiste en un sulfato de calcio bifásico puro (3D Bond), que es completamente reabsorbido y reemplazado por hueso del paciente.

La segunda matriz está formada por una pequeña cantidad de hidroxiapatita sintética de reabsorción lenta que sirve como mantenedor de espacio para un control de volumen optimizado.



- No requiere membrana
- Formación ósea en 4 meses
- Bacteriostático
- Aumento lateral sin microtornillos
- Puede quedar expuesto hasta 3 mm
- Adhesivo efecto bonding
- 100% estabilidad primaria del injerto
- Rápida regeneración
- Biocompatible
- Efecto barrera
- Mínima cirugía
- Menor trauma



Tres simples pasos



01

COLOCAR

Colocar el material en el sitio del injerto



02

COMPRIMIR

Comprimir firmemente durante 3 segundos





03

CERRAR


Cerrar con tensión sin utilizar membrana



Defecto óseo de cuatro paredes.

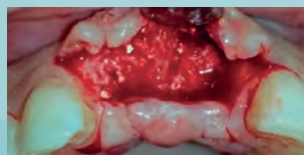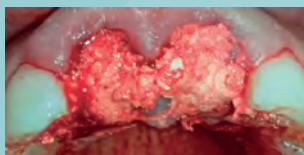

Caso clínico con pieza n° 35 infectada.

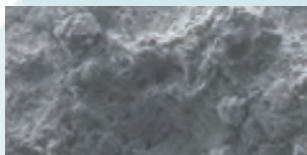

SEM presenta una estructura micro (0-10m) y macroporosa (50-500m) combinada con una alta porosidad general de más del 40%.

Beneficios Inmediatos



No se requiere membrana



Tiempo de silla reducido



Protocolos quirúrgicos mínimamente invasivos

Augma Biomaterials Ltd. es una empresa israelí dinámica e innovadora fundada por el Dr. Amos Yahav que desarrolla materiales de relleno óseo y accesorios para el aumento óseo en cirugía maxilofacial. La actividad de la empresa se basa en dos aspectos principales:

El desarrollo de nuevos productos de aumento óseo, basados en muchos años de experiencia que toma en cuenta los desafíos que afrontan los profesionales.

Un servicio, así como un importante soporte brindado a los profesionales para obtener mejores resultados, más rápido y más fácil.

Más info:



Distributed By


MICRODENT
IMPLANT SYSTEM

Manufactured By


Augma™
BIOMATERIALS



TELÉFONO

93 844 76 50



E.MAIL

info@microdentsystem.com